

1 Domaine d'application	Ce document décrit la procédure de prélèvement des dermatophyties
2 Documents associés	Norme NF EN ISO 15189, ANOFEL 2014, Rémic 6.1 C2-PR01 Manuel de prélèvement
3 Responsabilité	Prélèvement réalisé par un biologiste habilité à la demande du clinicien
4 Contact	Service de dermatologie du CHAR et autres collaborateurs universitaires

Seule la version électronique fait foi

Rédigé par :

CAROD Jean François

Date : 22-03-21

Validé par :

CAROD Jean François

Date : 2021-03-23

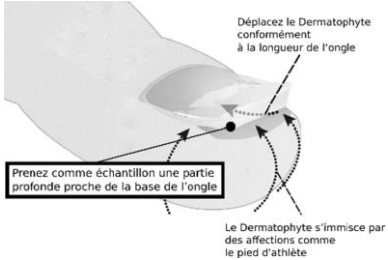
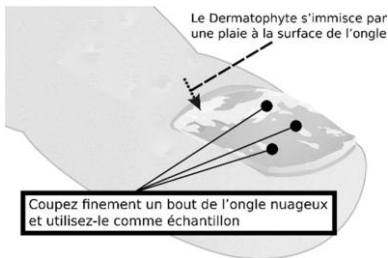
Approuvé par :

GOUBIER Jennifer

Date : 2021-03-24

5 Méthodologie

Prélèvement de qualité réalisé à distance de toute thérapeutique locale ou générale (15 jours pour les topiques, 3 mois pour les solutions filmogènes ou terbinafine PO)

Peau glabre	Teignes	Onychomycoses
 Gratter les squames en périphérie de la lésion (si lésion inflammatoire/humide : frotter avec écouvillon humide)  Prélèvement avec curette les intertrigos  Pityriasis versicolor : scotch-est	Wood si disponible +  Prélever les squames + croutes en périphérie des alopecies ainsi que les cheveux courts cassés (scalpel, pince, curette). Ne PAS couper des cheveux entiers sains.  P'iedra : couper des cheveux infectés.	  Déplace le Dermatophyte conformément à la longueur de l'ongle Prenez comme échantillon une partie profonde proche de la base de l'ongle Le Dermatophyte s'immisce par des affections comme le pied d'athlète Dans le cas d'une onychomycose sous-unguéale distale et latérale  Le Dermatophyte s'immisce par une plaie à la surface de l'ongle Coupez finement un bout de l'ongle nuageux et utilisez-le comme échantillon Dans le cas d'une onychomycose blanche superficielle